



Kurtsan Medikal

Roll®

**Pratik Pansuman
Ürünleri**

KURTSAN MEDİKAL FABRİKASI / BANDIRMA



- Flasterler • Yara Pansuman Pedleri • Göz bantları • Yarabantları
- Yaki • Yarabakım ürünleri (Lohmann&Rauscher)

► Kuruluş : 1988

► **Lohmann**  **Rauscher** Türkiye tek distribütörü


Kurtsan Holding



Kurtsan Medikal



Kurtsan İlaçları

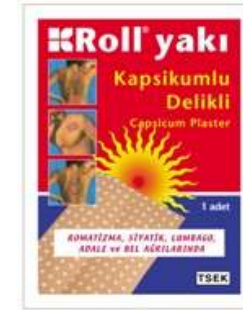

Büyük Eczane



Kurbilsev



Kurtsan Medikal

Roll®

MARKALI ÜRÜNLERİMİZ



Flasterler

Roll®plast
Roll®ipek
Roll®med
Roll®trans
Roll®fix

Yara Pedleri

Roll®por
Roll®film pedli
Roll®kanül

Göz Bantları

Roll®ped
Roll®optik

**Sargı Bezi
Gaz Kompres
Bandajlar**

Roll®flex
Roll®elast

Yarabantları

Roll®bant

Yakı

Roll®yakı

Antiseptik

Roll®
Antiseptik
Sprey



Flasterler

Tıbbi amaçlı sabitlemede kullanılan bant

Bileşenleri:

Taşıyıcı sırt malzemesi (bez,kağıt vb.)

+

Yapışkan (akrilik, kauçuk vb.)



Flasterler

Avantajlarımız :

- ✓ **Cilt tipine ve kullanım yerine uygun çeşitler**
(Farklı yapışma kuvvetleri ve yapıya sahip çeşitler)
- ✓ **Kolay Uygulama**
(Kolayca yırtılıp uygulanma ile zamandan ve malzemedan tasarruf)
- ✓ **Hijyenik Üretim Koşulları**
(GMP'ye uygun sağlıklı koşullarda üretilen ürünler)
- ✓ **Kaliteli hammadde**
(Hassas ciltlerde bile uygun ürünlerle sorunsuz kullanım)

Flasterler

		Taşıyıcı	Yapışkan
Roll®plast		Ten rengi pamuklu bez	+ Çinko oksitli Kauçuk
Roll®ipek		Beyaz renk asetat bez	+ Çinko oksitli Kauçuk
Roll®med		Beyaz renk nonwoven kağıt	+ Hipoallerjenik Akrilik
Roll®trans		Şeffaf delikli polietilen	+ Hipoallerjenik Akrilik
Roll®fix		Delikli, esnek nonwoven poliester	+ Hipoallerjenik Akrilik

Flasterler

Roll®plast

Çinko oksitli bez flaster



- | | |
|------------------|--|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Ten rengi pamuklu bez |
| Yapışkan | ➤ Çinko oksitli kauçuk yapışkan |
| Sunum Şekli | ➤ Kırmızı, plastik makarada |
| Avantajı | ➤ -Yüksek yapışma gücü
-Sağlam yapısı
-Elle kolay yırtılabilmesi |

Flasterler

Roll®ipek

Çinko oksitli ipek flaster



- | | |
|------------------|---|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Beyaz renk asetat bez |
| Yapışkan | ➤ Çinko oksitli kauçuk yapışkan |
| Sunum Şekli | ➤ Sarı, plastik makarada |
| Avantajı | ➤ -Yüksek yapışma gücü
-Estetik, sık dokuması
-Sağlam yapısı
-Enine-boyuna kolay yıtilabilmesi |

Flasterler

Roll®med

Hipoallerjenik kağıt flaster



- | | |
|------------------|--|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Beyaz renk nonwoven kağıt |
| Yapışkan | ➤ Hipoallerjenik poliakrilat |
| Sunum Şekli | ➤ Yeşil, plastik kesicili makarada |
| Avantajı | ➤ -Hassas ciltlere uygun yapışkanı
-İnce, hava geçirgen yapısı
-Enine-boyuna kolay ve düz yırtılabilmesi |

Flasterler

Roll®trans

Hipoallerjenik delikli şeffaf flaster



- | | |
|------------------|--|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Şeffaf, delikli, polietilen |
| Yapışkan | ➤ Hipoallerjenik poliakrilat |
| Sunum Şekli | ➤ Karton makarada |
| Avantajı | ➤ -Hassas ciltlere uygun yapışkanı
-Şeffaf, delikli hava geçirgen yapısı
-Enine-boyuna kolay ve düz yırtılabilmesi |

Flasterler

Roll®fix

Hipoallerjenik esnek flaster



- | | |
|------------------|---|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Delikli esnek nonwoven poliester |
| Yapışkan | ➤ Hipoallerjenik poliakrilat |
| Sunum Şekli | ➤ Karton makarada |
| Avantajı | ➤ -Yüksek yapışma gücü
-Hassas ciltlere uygun yapışkanı
-Delikli hava geçirgen yapısı
-Esneyerek vücut kıvrımlarına uyum sağlaması |

Flasterler

		Hangi cilt için	Avantajı
Roll®plast		Normal	Yüksek yapışma gücü, sağlam yapı, kolay yırtılma
Roll®ipek		Normal	Yüksek yapışma gücü, kolay yırtılma, estetik görünüm
Roll®med		Hassas Normal	Alerji yapmaması, düzgün yırtılması, iyi yapışması
Roll®trans		Hassas Normal	Alerji yapmaması, şeffaf ve delikli oluşu, kolay yırtılması, güçlü yapışkanı
Roll®fix		Hassas Normal	Alerji yapmaması, esnek yapısı, çok iyi yapışması, konforu



Önemli Hatırlatma!

Yapışkanlı tüm ürünler için

- *Ürünün yapıştırılacağı yer*
Temiz ve Kuru olmalı
- *Yapışmanın daha kuvvetli olması için ürünün*
üzerinden ***hafifçe baskı uygulanmalı***
(Basınca duyarlı yapışkan)



Yara Pedleri

Avantajları :

- ✓ **İki ürün yerine bir tek ürün**
(Flaster ve gazlı bezin işini tek başına yapar)
- ✓ **Kendinden Yapışkanlı**
(Kolayca ve hijyenik olarak uygulanabilir)
- ✓ **Pratik**
(Aç-kullan prensibi ile üretilmiştir)
- ✓ **Steril**
(Gamma sterilizasyonla steril edilmiş, tek kullanımlık ve hijyeniktir)
- ✓ **Yaraya yapışmayan emici tamponlu**
(Yaraya yapışmaz, sargı değişimlerinde yaraya zarar vermez)

Yara Pedleri

Roll®por

Steril kendinden yapışkanlı yara pedi



- | | |
|------------------|---|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Delikli esnek nonwoven poliester |
| Yapışkan | ➤ Hipoallerjenik poliakrilat |
| Sunum Şekli | ➤ Tek tek zarflarda, steril olarak |
| Avantajı | ➤ -Yüksek yapışma gücü
-Hassas ciltlere uygun yapışkanı
-Delikli hava geçirgen yapısı
-Esneyerek vücut kıvrımlarına uyum sağlaması |

Yara Pedleri

Roll®film Pedli

Steril kendinden yapışkanlı
film yara pedi



- | | |
|------------------|---|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Şeffaf esnek poliüretan film |
| Yapışkan | ➤ Hipoallerjenik poliakrilat |
| Sunum Şekli | ➤ Tek tek zarflarda, steril olarak |
| Avantajı | ➤ -Su ve bakteri geçirmemesi
-Hava geçirgen poliüretan yapısı
-Hassas ciltlere uygun yapışkanı
-Vücut kıvrımlarına uyum
sağlayan ince ve esnek yapısı |

Yara Pedleri

	Nerede kullanılır?	Avantajı
Roll®por 	Tüm yüzeysel pansumanlarda	<i>Esnek yapısı</i> Delikli, yüksek havageçirgen olması
Roll®film pedli 	Tüm yüzeysel pansumanlarda	Su ve bakteri geçirmez, <i>Banyo yapılabilir</i> Dayanıklı, İnce, Şeffaf

Kanül Sabitleyici Flaster

Roll®kanül

Steril kanül sabitleyici flaster
- Şeffaf tipi “trans”-



- | | |
|------------------|---|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Esnek nonwoven ve/veya şeffaf film |
| Yapışkan | ➤ Hipoallerjenik poliakrilat |
| Sunum Şekli | ➤ Tek tek zarflarda, steril olarak |
| Avantajı | ➤ Şeffaf filmli tipinde ile su ve bakteri geçirmemesi, hava geçirgen olması
➤ Hassas ciltlere uygun yapışkanı
➤ Vücut kıvrımlarına uyum sağlayan ince ve esnek yapısı |



Göz Bantları

- **Roll[®]ped**

Steril kendinden yapışkanlı göz pedi

- **Roll[®]optik**

Şaşılık ve göz tembelliği için kapatıcı göz bandı

Göz Bantları

Roll®ped

Steril kendinden yapışkanlı göz pedi



- | | |
|------------------|--|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Delikli esnek nonwoven |
| Yapışkan | ➤ Hipoallerjenik poliakrilat |
| Sunum Şekli | ➤ Tek tek zarflarda, steril olarak |
| Avantajı | ➤ -Yüksek yapışma gücü
-Hassas ciltlere uygun yapışkanı
-Delikli hava geçirgen oval yapısı
-Esneyerek vücut kıvrımlarına uyum sağlaması |

Göz Bantları

Roll®Optik

*Şaşılık ve Göz Tembelliği'nde
“Kapama tedavisi” için göz bandı*



Göz Bantları

Roll®Optik – Kapatıcı Göz Bandı

– Göz Kapama Tedavisi

Kapama tedavisi; iyi gören gözün kapatılması ile tembel gözün görmeye zorlanması esasına dayanır.

- Çocuğun iyi gören gözünü kapatırsanız, çok kötü görüyorsa, derin bir görme azlığı varsa, mutlaka onu çıkarıp atmak isteyecektir.
- Ancak, çocuğun karakterine uyumlu hale getirerek bu tedaviyi mutlaka uygulamak gerekiyor.
- Bu yolla üç ile altı ay içinde istenilen sonuç genelde alınır.
- Ama kapama tedavisi düzenli olmuyorsa, o zaman bu süre aylarca uzayarak bir, iki sene, hatta daha uzun sürebilir.





Göz Bantları

Roll®Optik - Avantajları

- ✓ **Hipoallerjenik** ➤ Hassas ciltlere uygundur
- ✓ **Gözenekli** ➤ Havayı ve teri geçirir
- ✓ **Esnek** ➤ Göz çevresine uyumludur
- ✓ **Koyu renkli ped** ➤ Işığın geçişini engeller
- ✓ **Yapışmayan tampon** ➤ Kolayca, acısız çıkarılır
- ✓ **Çeşitli Renk ve Desenler** ➤ Çocukların kapama tedavisine kolay uyum göstermelerini sağlar

Göz Bantları

Roll®Optik - ambalaj

✱ Genel olarak kapama tedavisi, düzenli uygulamayla 3-6 ay içinde tamamlanır. Ancak düzensiz uygulama ve çocukların direnç göstermesi nedeniyle 1-2 yıl veya daha da uzun sürebilmektedir.

20 adet/kutu

48 kutu/koli

50 adet/kutu

48 kutu/koli

100 adet/kutu

24 kutu/koli



Roll flex

Hidrofil Sargı Bezi

Elastik Sargı Bezi

Steril Gaz Kompres 7.5x7.5cm

Steril Gaz Bezi 30x80cm





Roll flex – Sargı Bezleri

Hidrofil Pamuklu Sargı Bezi

- %100 pamuk ipliğinden dokunmuş hidrofil sargı bezleri, yaraların üstüne yerleştirilen kompresleri sabitlemek için kullanılır.

Elastik Sargı Bezi

- Hafif basınç etkisine sahip elastik sargı bezi, kanamalı vakalarda kompresleri sabitlerken aynı zamanda yaraya basınç yapması için kullanılabilir.
- Elastik sargı bezi vücudun kıvrımlı bölgelerinde hastaya daha fazla konfor sağladığı için tercih edilebilir.



Roll flex – Sargı Bezleri

- Roll flex sargı bezi, dış yüzü cilt tarafına gelecek şekilde sarılır.
- Her kat bir öncekinin yarısını kapatacak şekilde sarılır.



Roll flex – Sargı Bezleri

Hidrofil sargı bezi

- %100 pamuk içerir
- 20 teldir
- Kendinden kenarlıdır, yaraya iplik bırakmaz, hijyenik kullanım imkanı sağlar.

Elastik Sargı Bezi

- %60 pamuk, %40 elastan
- Kendinden kenarlıdır.

*** Hidrofil: Suyu seven**



Roll flex – Sargı Bezleri

Roll flex - Hidrofil Sargı Bezi

5cm x 1.5m
7cm x 1.5m
10cm x 1.5m
15cm x 2m

Roll flex - Elastik Sargı Bezi

6cm x 2m
8cm x 2m
10cm x 2m

- Sunum şekli tek tek ambalajlanmış, şeffaf selefon ambalaj içinde
- 25'li kutularda



Roll flex – Steril Gaz Bezi ve Kompres

Gaz Bezi 30cmx80cm

- %100 pamuk içerir, 20 teldir
- Tek tek ambalajlamış ve sterilize edilmiştir.
- Kenarları içe katlanmıştır, yaraya iplik bırakmaz, hijyenik kullanım imkanı sağlar.

Gaz Kompres 7.5cmx7.5cm

- %100 pamuk içerir, 20 teldir
- 5'li olarak ve sterilize edilmiştir. Böylece 25'li paketlerdeki açıldıktan sonra kullanılmayan kısmın nonsteril hale gelme problemi önlenmiş olur.
- Kenarları içe katlanmıştır, yaraya iplik bırakmaz, hijyenik kullanım imkanı sağlar.



Roll flex – Steril Gaz Bezi ve Kompres

Roll flex - Gaz Bezi
30cm x 80cm
150'li kutuda

Roll flex – Gaz Kompres
7.5cmx7.5cm
25'li, 50'li ve 100'lü kutuda

Roll Elast

Renkli Elastik Bandajlar





Bandaj Nedir?

- İstenen bölgeye lokal basınç yapabilmek amacı ile içerisinde gerilmeyi sağlayan esnek bileşenler bulunduran bir ilk yardım malzemesidir.



Nerelerde Kullanılır?

- Elastik bandaj ezilme, burkulma ve yaralanmalarda istenen bölgeye basınç uygular ve bu bölgeye destek olur. Elastik bandaj çeşitli nedenlerle kullanılabilir:
- Ezilme, burkulma ve diğer nedenlere bağlı yaralanmalarda, bu bölgelerdeki ağrı ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olmak için
- Yara tamponlarını sabitlemek için
- Kol ve bacak atellerinin sabitlenmesi için
- Koldaki veya bacakdaki kan akışını güçlendirmek için
- Sıcak-soğuk kompresleri istenen vücut bölgesine sabitlemek için



Bandaj Nasıl Uygulanır?

- Bandajın dış yüzü cilt tarafına gelecek şekilde sarılmaya başlanır.
- Her kat bir önceki katın yarısını veya üçte birini kaplayacak şekilde sarılmalıdır.



Roll elast – Tıbbi Elastik Bandaj

- Kalıcı elastikiyete sahiptir
- Ilık suda yıkanarak tekrar kullanılabilir
- Yumuşak ve dayanıklı yapıdadır
- Alerji yapmaz
- Kan dolaşımını etkilemez
- Renkli bandajlar estetik görünüm sağlar



Roll elast – Tıbbi Elastik Bandaj

- Pamuk : %70
- Poliamid : %25
- Likra : %5
- Gerilmeden kütlesi : En az 230 g/m²
- Uzama : En az %121

Roll elast – Tıbbi Elastik Bandaj

BOYUTLAR	TEN RENGİ	KIRMIZI	SARI	LACİVERT	YEŞİL
6cm x 3.5m	√	√	√	√	√
8cm x 3.5m	√	√	√	√	√
10cm x 3.5m	√	√	√	√	√
12cm x 3.5m	√				
15cm x 3.5m	√				



Roll elast – Tıbbi Elastik Bandaj

Avantajlarımız

- İdeal elastik bandaj istenen uygulamada uzun gerilmeli bandaj olarak kullanılabilir
- Hijyenik şeffaf ambalaj içinde tüketiciye ulaşır
- Ilık su ile yıkanarak tekrar kullanılabilir
- 5 farklı estetik renkle kıyafetlere uyumlu kullanılabilme imkanı sağlar

Yarabantları



Roll®bant

Yeni Seri Yara Bantları

- Family Mix
- Children Mix
- Advanced Mix
- Haemostatic Mix
- Wound Plus
- Protect Plus

Roll®bant Yeni Seri Yara Bantları



Family Mix

Değişik ebatlar içeren karma çeşitleri ile tüm aile fertlerinin ihtiyacına uygundur.



Children Mix

Sırt yapısındaki eğlenceli çizgi karakterler ile çocukların kullanımına uygundur.



Advanced Mix

Aloe-Vera içeren pedi ile yaranın acısını azaltıcı ve rahatlatıcı etkili, ayrıca nemli tutarak iyileşme sürecini destekleyicidir.



Haemostatic Mix

Patentli mdoc partikülleri içeren emici pedi sayesinde küçük kesik ve sıyrıklarda kanamayı birkaç dakika içinde durdurur.



Wound Plus

Arttırılmış kutu içeriği ile çok yara bandı kullananlar için ekonomiktir.



Protect Plus

İleri teknoloji poliüretan filminden üretilen sırt yapısı sayesinde, yaraya su ve bakteri geçişini engellerken, cildin nefes alışverişine devam etmesini sağlar.

Yarabantları

Roll®bant Klasik

Klasik bez yara bandı



- | | |
|------------------|--|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Ten rengi, bez |
| Yapışkan | ➤ Çinko oksitli kauçuk |
| Sunum Şekli | ➤ 30'lu paketlerde |
| Avantajı | ➤ -Suya dayanıklı
-Hava geçirgen delikli yapı
-Vücut kıvrımlarına uyum sağlayan ince ve esnek yapısı |

Yarabantları

Roll®bant First-aid Yuvarlak enjeksiyon bandı



- | | |
|------------------|--|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Ten rengi, polietilen |
| Yapışkan | ➤ Hipoallerjenik poliakrilat |
| Sunum Şekli | ➤ Tek tek ambalajlanmış |
| Avantajı | ➤ -Suya dayanıklı
-Hava geçirgen delikli yapı
-Hassas ciltlere uygun yapışkanı
-Vücut kıvrımlarına uyum sağlayan ince ve esnek yapısı |

Yakı

Roll®yakı

Kapsikumlu, delikli yakı

Romatizma, Adale, Eklem Ağrılarında



- | | |
|------------------|--|
| Taşıyıcı Malzeme | ➤ Ten rengi pamuklu bez |
| Yapışkan | ➤ Kapsikum içeren kauçuk yapışkan |
| Sunum Şekli | ➤ Tek tek zarflarda ambalajlanmış |
| Avantajı | ➤ -Hava geçirgen delikli yapı
-Güçlü yapışkan
-Etkili hammadde
-Dört taraftan kilitli, güvenli ambalaj
-TSE standardında |

Roll Antiseptik Sprey



Roll Antiseptik Sprey

- 50ml

İçindekiler:

- Isopropyl Alcohol (%70)
- Chlorhexidine Digluconate (%1)
- Deionized water (%27)
- Glycerin(%2)



Roll Antiseptik Sprey

Nerelerde Kullanılabilir?

- Küçük çaplı kesik, sıyrık ve abrazyonlarda, sinek böcek ısırıklarında kişisel ilkyardım amacı ile yaralanan bölgenin lokal dezenfeksiyonu için kullanılabilir.
- Evde, iş yerinde, seyahatte, arabada günlük hayatta yaralanma riski bulunan her ortamda ihtiyaç duyulabilir.
- Ayrıca el antiseptiği olarak
 - Pansuman öncesi ve sonrasında
 - Hastalarla ve cerrahi aletlerle temas sonrasında
 - Enjeksiyon öncesi ve sonrasında
 - Bebeklerle temastan önce ve sonra kullanılabilir.



Roll Antiseptik Sprey

Kimler İhtiyaç Duyabilir?

- Tüm pansuman yapılan sağlık birimleri
 - Poliklinikler, eczaneler, cerrahi tıp merkezleri vb.
- Ev hanımları
- Çalışanlar
- Sporcular
- Anneler
- Sürücüler
- Öğretmenler
- İlk yardım ve ecza dolaplarında
-



Roll Antiseptik Sprey

Etkinliđi:

- Bakterilerin hücre yapısını bozarak ölmelerini sağlar.
- Alkolün ilk andaki hızlı ve yüksek etkisi ile klorheksidinin ciltte kalarak 4 saate kadar süren etkinliđi, yaranın uzun süre bakteriler karşı korunmasını sağlar.





Roll Antiseptik Sprey

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda yapılan anlık ve kalıcı etkinlik testleri sonucunda;

- Roll Antiseptik Sprey uygulandıktan sonra hiçbir bakteri kolonisinin üremediği görülmüştür.
- Uygulamadan sonraki 4 saat sonunda bile koloni sayısının %1 oranını geçmediği görülmüştür.
- Ayrıca Avrupa standartlarına göre (TS EN 1040) referans bakterilerde (*Pseudomonas aeruginosa* ve *Staphylococcus aureus*) yapılan uygulamada 1 dakikada bakterileri etkilemeye başladığı belirlenmiştir.



Roll Antiseptik Sprey

○ Nasıl uygulanmalıdır?

- Ürün kullanılmadan önce yara temizlenir.
- Yara çevresine, 10cm uzaktan püskürtülerek uygulanır. 10-15 spreyleme yeterli olacaktır.
- Film tabakası kuruyuncaya kadar beklenir.
- Yaranın üzeri hijyenik, kendinden yapışkanlı, steril bir ped (Rollpor, Rollfilm vb.) ile kapatılarak veya gazlı bez – flaster kombinasyonu ile pansuman tamamlanır.

Roll Antiseptik Sprey

Avantajları

- ⊕ 50ml'lik şık, kolay taşınabilir ambalaj
- ⊕ Sprey formu ile kolayca ve istenen miktarda uygulanabilme
- ⊕ Klorheksidin ile ciltte uzun süre etkinlik göstermesi
- ⊕ İçerdiği gliserin ile cilt kuruluğunu önleme
- ⊕ İyotlu ürünlere karşı alerjisi olan kişilerde kullanılabilme
- ⊕ Uygulama esnasında boya izi bırakmama

